



G-Smart Adult Test Lung

G-Smart 成人人工肺

G-Smart 成人人工肺 G-Smart Adult Test Lung

G-Smart 成人人工肺 是依据正常成人的肺阻力及顺应性设计而成,透过机器模拟成人呼吸系统的实际运作。在呼吸治疗前,治疗师须模拟患者肺部的实际情况,经适当的测试后,才可将呼吸管道移至患者端使用,广泛应用于呼吸机操作训练及呼吸治疗领域。

特点 Features

- 外壳采用杜邦塑钢材质,确保顺应性的一致性
- 体积小 (285x100x35 mm),重量轻 (210g)
- 使用简易,无须用电
- 硅胶储气袋可高温 (121°C) 高压消毒



裸空设计可以轻易的检查是否有异物或沾污。



外壳倾斜式设计及旋转安全固定扣,便于拆卸消毒、清洗及组装。



底部挂孔设计可挂于呼吸机旁,方便取用。



阻抗接头组提供不同模拟应用测试。



采用 EVA 内装,有效保护产品,避免撞伤。多功能包装袋,除产品外也可依需求搭配其它接头或资料存放。


规格表 Specifications

吸气阻抗性 Inspiration Resistance	5 cmH ₂ O/L/sec @ 60 LPM, air
吐气阻抗性 Expiration Resistance	5 cmH ₂ O/L/sec @ 60 LPM, air
顺应性 Compliance	20 ml/cmH ₂ O @ 25 cmH ₂ O
容积 Volume	0-600 ml
储气袋 Bag Material	医疗级硅胶
接头 Fitting	符合ISO 5356-1


气动特性 Pneumatic Characteristics



顺应性 Compliance

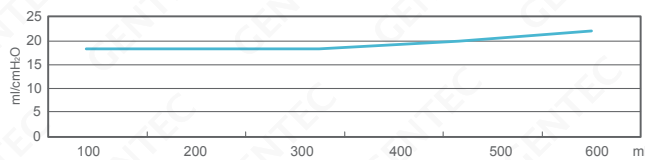

阻抗性 Resistance

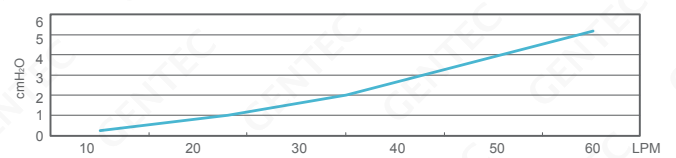

订购指南 Ordering Information

型号	规格
665-001	成人人工肺, 1L
665-002	人工肺阻抗接头组, Rp20, Rp50, Rp70

注意：阻抗接头不可使用在病患体上，此接头是在非医疗操作上使用。



北京办事处(华北地区)

电话: 010-85367028

传真: 010-85367028

地址: 北京市朝阳区常营么家店路2号院
2号楼1单元702

青岛办事处(山东地区)

电话: 0532-66776940

传真: 0532-66776941

地址: 青岛市市南区福州南路19号
3号楼2404室

西安办事处(西北地区)

电话: 029-88216277

传真: 029-88216277

地址: 西安市雁塔区南二环西段154号
易和蓝钻办公楼一单元10层04室

成都办事处(西南地区)

电话: 028-85085744

传真: 028-85081044

地址: 成都市武侯区鞋都南一路9号
鞋王大厦C栋1403室

深圳办事处(华南地区)

电话: 0755-22678552

传真: 0755-22678552

地址: 深圳市南山区西丽南路留仙大道交汇处
众冠西郡园1栋A-11C

武汉办事处(华中地区)

电话: 027-88121829

传真: 027-88122039

地址: 武汉市武昌区名邸公馆
A区3栋2单元1501室



捷锐企业(上海)有限公司

GENTEC (SHANGHAI) CORPORATION

上海市松江区文吉路499号, 201616

电话: 021-67727722

传真: 021-67727754

网址: www.gentec.com

电子邮件: info@gentec.com.cn



Genstar Technologies Company Inc.

4525 Edison Avenue, Chino, CA 91710, USA

Tel: 909-606-2726

Fax: 909-606-6485

www.gentec.com



关注微信公众号“捷锐悦呼吸”

随时了解更多新品发布、专业产品知识、展会活动等

捷锐——为您提供医用供气系统整体解决方案